

Diffractiva® 后房型多焦点非球面人工晶状体

360° LEC 屏障

防止 PCO

非球面光学设计 零球差

适用于所有患者，不用考虑
角膜的球面像差
保持景深和提高对比敏感度

亚纳米技术 优质光学效果

可使图像更清楚、对比度更强

优异的材料性能 灵感源于自然

经18年临床验证，葡萄膜生物
相容性优异，无闪辉

最大阅读舒适度

通过中央衍射环提供符合
人体工程学的阅读距离

周边折射区

与单焦点 IOL 相比，在中等照明
条件下具有优异的远视力


技术优势

DIFFRACTIVA®-aA
DIFFRACTIVA®-aAY YELLOW

- 基于已验证的单焦点 IOL ASPIRA-aA 设计
- 屈光度数范围：10.0 - 30.0 D，间隔 0.5D
- 具有蓝光保护功能
- 非球面，零球差前表面：
周边折射区和局部非球面设计的中央衍射区 (DOLA)
- 增加不同距离时的景深
- 其他多焦点 IOL 中经常发生的眩光和光能损失现象
明显减少

亚纳米技术 优质光学效果

- 高精度车床切削
- 纳米级切削技术
- 免抛光
- 高度定义了精准阶梯
和晶体表面

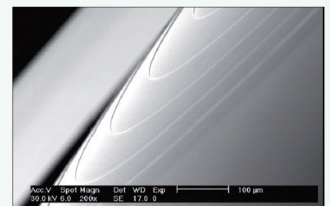

精准的衍射表面扫描电镜图片